11 Drugs Rapid Test Panel (Urine) Package Insert For Self-testing

A rapid test for the qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in human urine.
For self-testing, not for in vitro diagnostic use.

【INTENDED USE】

The 11-Drug Rapid Test Panel is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in urine at the following cut-off concentrations:

Test	Calibrator	Cut-off (ng/mL)
Amphetamine (AMP)	d-Amphetamine	1,000
Barbiturates (BAR)	Secobarbital	300
Benzodiazepines (BZO)	Oxazepam	300
Cocaine (COC)	Benzoylecgonine	300
Marijuana (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9 COOH	50
Methadone (MTD)	Methadone	300
Methamphetamine (MET)	d-Methamphetamine	1,000
Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA)	d,l-Methylenedioxymethamphetamine	500
Morphine/Opiate (MOP/OPI)	Morphine	300
Fentanyl (FYL)	Fentanyl	10
Mephedrone (MEP)	Mephedrone	100

The test provides only preliminary test results. A more specific alternative chemical method must be used in order to obtain a confirmed analytical result. GC/MS or LC/MS is the preferred confirmatory method.

【SUMMARY】

The 11-Drug Rapid Test Panel is a rapid urine screening test that can be performed without the use of an instrument. The test utilizes monoclonal antibodies to selectively detect elevated levels of specific drugs in urine.

【PRECAUTIONS】

- Read the entire package insert prior to performing test.
- For self-testing, not for *in vitro* diagnostic use.
- For external use only.
- Do not use the test after expiration date printed on the package.
- Do not use the test if its foil pouch is torn or damaged.
- For single use. Discard after first use.
- The test device should remain in the sealed pouch until use.
- Contaminated or tainted urine sample may give false results.
- Keep out of reach of children.

【MATERIALS PROVIDED】

- Test Panel (sealed in foil pouch with a desiccant)
- Package Insert

【MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED】

- Watch, clock or timer
- Urine collection cup

【STORAGE AND STABILITY】

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30 °C up to the date of expiration.
Keep away from direct sunlight, moisture and heat. DO NOT FREEZE.

【DIRECTIONS FOR USE】

Allow the test to reach room temperature (15-30 °C) before testing.
Wash your hands thoroughly.

Step 1: Collect Urine Sample

- Collect urine in a clean and dry container.


Step 2: Testing

- Remove the test panel from the sealed pouch and use it immediately.
- Remove the cap of the panel.
- Immerse the test panel vertically in the urine specimen for at least **10 to 15 seconds**.
- **Note:** Immerse the dipstick panel to at least the level of the wavy lines, but not above the arrow on the test panel.
- Replace the cap and place the test panel on a non-absorbent flat surface.
- Start a timer.


Step 3: Read Results

- **Read the test results at 5 minutes,** do not read results after 10 minutes.

- Remove the cap.
- Immerse 10-15 seconds

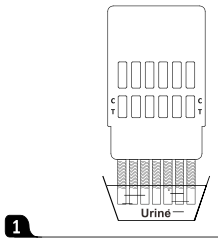

1

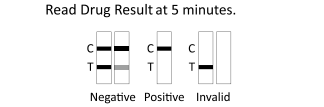

2

【INTERPRETATION OF RESULTS】

	**NEGATIVE: Two colored lines appear.** One line appears next to the letter 'C' and the other line appears next to the letter 'T'.
	**POSITIVE: Only one colored line appears next to the letter 'C'. No colored line appears next to the letter 'T'.**
	**INVALID: Control line fails to appear.**

IMPORTANT: The result you obtained is called preliminary for a reason. The sample must be tested by laboratory in order to confirm the result.

【Q&A】

1. How do I know if the test worked well?
When the control line(C) appears, it means that the test unit is working well.
2. How soon can I read my results?
You can read your results at 5 minutes as long as a colored line has appeared next to the Control region(C), do not read results after 10 minutes.
3. When is the best time to run the test?
You can run the test at any time of the day.
4. How to read the test if the color and the intensity of the lines are different?
The color and intensity of the lines have no importance for result interpretation. The test should be considered as negative whatever the color intensity of the test line (T) is.
5. What is a false positive test?
A false positive test result means the drug is not present but shows detected by the device. The most common causes of a false positive test are cross reactants.
6. What is a false negative test?
A false negative test means the drug is present but is not detected by the device. If the sample is diluted, or the sample is contaminated that may cause a false negative result.

【LIMITATIONS】

1. The test is for use with human urine only.
2. The test only provides a preliminary result.
3. Substances, such as bleach and/or alum, in urine specimens may produce incorrect results. If adulteration is suspected, the test should be repeated with another urine specimen.
4. Test does not distinguish between drugs of abuse and certain medications.
5. A positive test result may be obtained from certain foods or food supplements.

Index of Symbols

	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use		Contains sufficient for <n> tests	30°C 2°C	Temperature limit
	Caution	LOT	Batch code	REF	Catalogue number
EU REP	European Authorized Representative		Use-by date		Do not re-use
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use		Manufacturer		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Number:
Revision date:2026-09-23

11 narkotinių medžiagų greitojo testo plokštelė (Šlapimas)
Naudojimo instrukcija
Savarankiškam testavimui

Greitasis testas, skirtas kokybiniam kelių narkotinių medžiagų ir jų metabolitų nustatymui žmogaus šlapime.
Skirta savarankiškam testavimui, neskirta in vitro diagnostikai.

【PASKIRTIS】

11 narkotinių medžiagų greitojo testo plokštelė yra greitasis chromatografinis imunologinis tyrimas, skirtas kokybiniam kelių narkotinių medžiagų ir jų metabolitų nustatymui šlapime, esant šioms ribinėms koncentracijoms:

Testas	Kalibratorius	Ribinė koncentracija (ng/ml)
Amfetaminas (AMP)	d-amfetaminas	1 000
Barbitūratai (BAR)	Sekobarbitalis	300
Benzodiazepinai (BZO)	Oksazepamas	300
Kokainas (COC)	Benzoilekgoninas	300
Marihuana (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH	50
Metadonas (MTD)	Metadonas	300
Metamfetaminas (MET)	d-metamfetaminas	1 000
Metilendioksimetamfetaminas (MDMA)	d,l-metilendioksimetamfetaminas	500
Morfinas / opiatai (MOP/OPI)	Morfinas	300
Fentanilis (FYL)	Fentanilis	10
Mefedronas (MEP)	Mefedronas	100

Testas pateikia tik preliminarius rezultatus. Norint gauti patvirtintą analitinį rezultatą, būtina naudoti specifiškesnį alternatyvų cheminį metodą. Pageidautinas patvirtinimo metodas – GC/MS arba LC/MS.

【SANTRAUKA】

11 narkotinių medžiagų greitojo testo plokštelė – tai greitasis šlapimo atrankinis testas, kurį galima atlikti nenaudojant jokio prietaiso. Teste naudojami monokloniniai antikūnai, kurie selektyviai aptinka padidėjusį tam tikrų narkotinių medžiagų kiekį šlapime.

【ATSARGUMO PRIEMONĖS】

- Prieš atlikdami testą, perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
- Skirta savarankiškam testavimui, neskirta *in vitro* diagnostikai.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Nenaudokite testo pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui.
- Nenaudokite testo, jei folijos maišelis įplyšęs arba pažeistas.
- Vienkartinis. Panaudotą išmeskite.
- Testo plokštelę iki naudojimo laikykite sandariame maišelyje.
- Užterštas arba suklastotas šlapimo mėginys gali lemti klaidingus rezultatus.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

【PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS】

- Testo plokštelė (sandariame folijos maišelyje su sausikliu)
- Naudojimo instrukcija

【REIKALINGOS, BET NEPATEIKIAMOS MEDŽIAGOS】

• Laikrodis arba laikmatis • Šlapimo surinkimo indelis

【LAIKYMAS IR STABILUMAS】

Laikykite originalioje pakuotėje, sandariame maišelyje, 2–30 °C temperatūroje iki tinkamumo laiko pabaigos.

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir karščio. NEUŽŠALDYKITE.

【NAUDOJIMO NURODYMAI】

Prieš atlikdami testą, palaukite, kol testas sušils iki kambario temperatūros (15–30 °C). Kruopščiai nusiplaukite rankas.

1 žingsnis. Surinkite šlapimo mėginį

- Surinkite šlapimą į švarų ir sausą indelį.


2 žingsnis. Testavimas

- Išimkite testo plokštelę iš sandaraus maišelio ir nedelsdami ją panaudokite.
- Nuimkite plokštelės dangtelį.
- Panardinkite testo plokštelę vertikaliai į šlapimo mėginį bent **10–15 sekundžių**.
- **Pastaba.** Plokštelę panardinkite bent iki banguotų linijų lygio, bet ne aukščiau rodyklės ant testo plokštelės.
- Uždėkite dangtelį ir padėkite testo plokštelę ant nesugeriančio lygaus paviršiaus.
- Įjunkite laikmatį.


3 žingsnis. Rezultatų įvertinimas

- **Rezultatus įvertinkite po 5 minučių**, praėjus 10 minučių rezultatų nevertinkite.

• Nuimkite dangtelį.
• Panardinkite 10–15 sekundžių

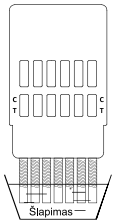

1

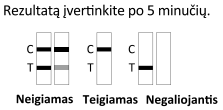

2

【REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS】

	**Neigiamas: atsiranda dvi spalvotos linijos.** Viena linija atsiranda prie raidės „C“, kita – prie raidės „T“.
	**Teigiamas: atsiranda tik viena spalvota linija prie raidės „C“. Prie raidės „T“ spalvota linija neatsiranda.**
	**Negaliojantis: kontrolinė linija neatsiranda.**

SVARBU. Gautas rezultatas ne be priežasties vadinamas preliminariu. Norint patvirtinti rezultatą, mėginys turi būti ištirtas laboratorijoje.

【KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI】

1. Kaip sužinoti, ar testas veikė tinkamai?
Jei atsiranda kontrolinė linija (C), vadinasi, testas veikia tinkamai.

2. Po kiek laiko galiu įvertinti rezultatus?
Rezultatus galite įvertinti po 5 minučių, jei prie kontrolinės srities (C) atsirado spalvota linija; praėjus 10 minučių rezultatų nevertinkite.

3. Kada geriausia atlikti testą?
Testą galite atlikti bet kuriuo paros metu.

4. Kaip įvertinti testą, jei linijų spalva ir intensyvumas skiriasi?
Linijų spalva ir intensyvumas rezultatų interpretavimui reikšmės neturi. Jei prie raidės „T“ atsiranda bet kokio intensyvumo linija (net ir labai blanki), testo rezultatas laikomas neigiamu.

5. Kas yra klaidingai teigiamas testo rezultatas?
Klaidingai teigiamas rezultatas reiškia, kad narkotinės medžiagos mėginyje nėra, tačiau testas rodo, kad ji aptikta. Dažniausia klaidingai teigiamo rezultato priežastis – kryžmiškai reaguojančios medžiagos.

6. Kas yra klaidingai neigiamas testo rezultatas?
Klaidingai neigiamas rezultatas reiškia, kad narkotinė medžiaga mėginyje yra, tačiau testas jos neaptinka. Klaidingai neigiamą rezultatą gali lemti praskiestas arba užterštas mėginys.

【APRIBOJIMAI】

1. Testas skirtas naudoti tik su žmogaus šlapimu.
2. Testas pateikia tik preliminarų rezultatą.
3. Šlapimo mėginiuose esančios medžiagos, pvz., baliklis ir (arba) alūnas, gali lemti neteisingus rezultatus. Įtarus, kad mėginys suklastotas, testą reikia pakartoti su kitu šlapimo mėginiu.
4. Testas neatskiria narkotinių medžiagų, kuriomis piktnaudžiaujama, nuo tam tikrų vaistų.
5. Teigiamą testo rezultatą gali lemti tam tikri maisto produktai arba maisto papildai.

Simbolių rodyklė

	Žr. naudojimo instrukcijas arba elektronines naudojimo instrukcijas		Pakanka <n> testams		Temperatūros riba
	Atsargiai	LOT	Partijos kodas	REF	Katalogo numeris
EU REP	Europos įgaliotasis atstovas		Geriausias iki datos		Nenaudoti pakartotinai
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir perskaitykite naudojimo instrukcijas.		Gamintojas		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Numeris:
Peržiūros data: 2026-09-23

Testera

11 narkotiku ātrās noteikšanas testa panelis (Urīns)
Lietošanas instrukcija
Paštestēšanai

Ātrais tests vairāku narkotiku un to metabolītu kvalitatīvai noteikšanai cilvēka urīnā.

Paštestēšanai, nav paredzēts in vitro diagnostikai.

【PAREDZĒTĀ LIETOŠANA】

11 narkotiku ātrās noteikšanas testa panelis ir ātra hromatogrāfiska imūnanalīze vairāku narkotiku un to metabolītu kvalitatīvai noteikšanai urīnā, izmantojot šādas robežkoncentrācijas:

Tests	Kalibrators	Robežkoncentrācija (ng/ml)
Amfetamīns (AMP)	d-amfetamīns	1 000
Barbiturāti (BAR)	Sekobarbitāls	300
Benzodiazepīni (BZO)	Oksazepāms	300
Kokaīns (COC)	Benzoilekgonīns	300
Marihuāna (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH	50
Metadons (MTD)	Metadons	300
Metamfetamīns (MET)	d-metamfetamīns	1 000
Metilēndioksimetamfetamīns (MDMA)	d,l-metilēndioksimetamfetamīns	500
Morfīns / opiāti (MOP/OPI)	Morfīns	300
Fentanils (FYL)	Fentanils	10
Mefedrons (MEP)	Mefedrons	100

Tests sniedz tikai provizoriskus rezultātus. Lai iegūtu apstiprinātu analītisko rezultātu, jāizmanto specifiskāka alternatīva ķīmiskā metode. Ieteicamā apstiprinošā metode ir GC/MS vai LC/MS.

【KOPSAVILKUMS】

11 narkotiku ātrās noteikšanas testa panelis ir ātrs urīna skrīninga tests, ko var veikt bez jebkādas aparatūras. Testā izmanto monoklonālas antivielas, kas selektīvi nosaka konkrētu narkotiku paaugstinātu līmeni urīnā.

【PIESARDZĪBAS PASĀKUMI】

- Pirms testa veikšanas izlasiet visu lietošanas instrukciju.
- Paštestēšanai, nav paredzēts *in vitro* diagnostikai.
- Tikai ārīgai lietošanai.
- Nelietojiet testu pēc derīguma termiņa beigām, kaSs norādīts uz iepakojuma.
- Nelietojiet testu, ja folijas maisiņš ir saplīsis vai bojāts.
- Vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas izmetiet.
- Līdz lietošanai glabājiet testa paneli noslēgtā maisiņā.
- Piesārņots vai viltots urīna paraugs var dot kļūdainus rezultātus.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

【KOMPLEKTĀ IETVERTIE MATERIĀLI】

- Testa panelis (noslēgtā folijas maisiņā ar žāvētājs)
- Lietošanas instrukcija

【NEPIECIEŠAMIE, BET KOMPLEKTĀ NEIETVERTIE MATERIĀLI】

• Pulkstenis vai taimeris • Urīna savākšanas trauks

【UZGLABĀŠANA UN STABILITĀTE】

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, noslēgtā maisiņā, 2–30 °C temperatūrā līdz derīguma termiņa beigām.

Sargāt no tiešiem saules stariem, mitruma un karstuma. NESASALDĒT.

【LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI】

Pirms testēšanas ļaujiet testam sasilt līdz istabas temperatūrai (15–30 °C).

Rūpīgi nomazgājiet rokas.

1. solis. Urīna parauga savākšana

- Savāciet urīnu tīrā un sausā traukā.


2. solis. Testēšana

- Izņemiet testa paneli no noslēgtā maisiņa un nekavējoties to izmantojiet.
- Noņemiet paneļa vāciņu.
- Iegremdējiet testa paneli vertikāli urīna paraugā vismaz uz **10–15 sekundēm**.
- **Piezīme.** Iegremdējiet paneli vismaz līdz viļņoto līniju līmenim, bet ne augstāk par bultiņu uz testa paneļa.
- Uzlieciet vāciņu atpakaļ un novietojiet testa paneli uz neuzsūcošas, līdzenas virsmas.
- Iedarbiniet taimeri.

3. solis. Rezultātu nolasīšana


- **Nolasiet testa rezultātus pēc 5 minūtēm**, pēc 10 minūtēm rezultātus vairs nenolasiet.

• Noņemiet vāciņu.
• Iegremdējiet 10–15 sekundes

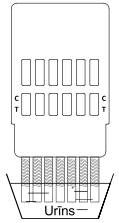

1

Nolasiet zāļu rezultātu pēc 5 minūtēm.

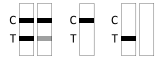

Negatīvs Pozitīvs Nederīgs

2

【REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA】

	**Negatīvs: parādās divas krāsainas līnijas.** Viena līnija parādās blakus burtam „C“, bet otra – blakus burtam „T“.
	**Pozitīvs: parādās tikai viena krāsaina līnija blakus burtam „C“. Blakus burtam „T“ krāsaina līnija neparādās.**
	**Nederīgs: kontroles līnija neparādās.**

SVARĪGI! Iegūtais rezultāts tiek saukts par provizorisku ne bez iemesla. Lai apstiprinātu rezultātu, paraugs jāpārbauda laboratorijā.

【JAUTĀJUMI UN ATBILDES】

1. Kā es varu zināt, vai tests darbojās pareizi?

Ja parādās kontroles līnija (C), tas nozīmē, ka tests darbojas pareizi.

2. Cik ātri es varu nolasīt rezultātus?

Rezultātus varat nolasīt pēc 5 minūtēm, ja blakus kontroles zonai (C) ir parādījusies krāsaina līnija; pēc 10 minūtēm rezultātus vairs nenolasiet.

3. Kad vislabāk veikt testu?

Testu var veikt jebkurā diennakts laikā.

4. Kā nolasīt testu, ja līniju krāsa un intensitāte atšķiras?

Līniju krāsai un intensitātei nav nozīmes rezultātu interpretācijā. Ja blakus burtam „T“ parādās jebkādas intensitātes līnija (pat ļoti vāja), testa rezultāts uzskatāms par negatīvu.

5. Kas ir viltus pozitīvs rezultāts?

Viltus pozitīvs rezultāts nozīmē, ka narkotikas paraugā nav, taču tests uzrāda, ka tā ir konstatēta. Visbiežākais viltus pozitīva rezultāta iemesls ir krusteniski reaģējošas vielas.

6. Kas ir viltus negatīvs rezultāts?

Viltus negatīvs rezultāts nozīmē, ka narkotika paraugā ir, taču tests to nekonstatē. Viltus negatīvu rezultātu var izraisīt atšķaidīts vai piesārņots paraugs.

【IEROBEŽOJUMI】

1. Tests ir paredzēts lietošanai tikai ar cilvēka urīnu.
2. Tests sniedz tikai provizorisku rezultātu.
3. Urīna paraugos esošas vielas, piemēram, balinātājs un/vai alauns, var izraisīt nepareizus rezultātus. Ja ir aizdomas par parauga viltošanu, tests jāatkārto ar citu urīna paraugu.
4. Tests neatšķir ļaunprātīgi lietotas narkotikas no noteiktām zālēm.
5. Pozitīvu testa rezultātu var izraisīt noteikti pārtikas produkti vai uztura bagātinātāji.

Simbolu rādītājs

	Skatiet lietošanas instrukciju vai elektronisko lietošanas instrukciju	Σ	Satur pietiekami daudz <n> testiem	2°C~30°C	Temperatūras ierobežojums
	Uzmanību	LOT	Partijas kods	REF	Katalogs skaitlis
EU REP	Eiropas pilnvarotais pārstāvis		Izlietot līdz		Nelietot atkārtoti
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un iepazīties ar lietošanas instrukciju		Ražotājs		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Numurs:
Pārskatīšanas datums: 2026-09-23

Testera

11 uimasti kiirtestpaneel (Uriin) Kasutusjuhend Enesetestimiseks

Kiirtest mitme uimasti ja nende metaboliitide kvalitatiivseks tuvastamiseks inimese uriinis.
Enesetestimiseks, ei ole mõeldud in vitro diagnostikaks.

【SIHTOTSTARVE】

11 uimasti kiirtestpaneel on kiire kromatograafiline immuunanalüüs mitme uimasti ja nende metaboliitide kvalitatiivseks tuvastamiseks uriinis järgmiste piirkontsentratsioonide juures:

Test	Kalibraator	Piirkontsentratsioon (ng/ml)
Amfetamiin (AMP)	d-amfetamiin	1 000
Barbituraadid (BAR)	Sekobarbitaal	300
Bensodiasepiinid (BZO)	Oksasepaam	300
Kokaiin (COC)	Bensoüülekgoniin	300
Marihuaana (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH	50
Metadoon (MTD)	Metadoon	300
Metamfetamiin (MET)	d-metamfetamiin	1 000
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	d,l-metüleendioksümetamfetamiin	500
Morfiin / opiaadid (MOP/OPI)	Morfiin	300
Fentanüül (FYL)	Fentanüül	10
Mefedroon (MEP)	Mefedroon	100

Test annab ainult esialgse tulemuse. Kinnitatud analüütilise tulemuse saamiseks tuleb kasutada spetsiifilisemat alternatiivset keemilist meetodit. Eelistatud kinnitusmeetod on GC/MS või LC/MS.

【KOKKUVÕTE】

11 uimasti kiirtestpaneel on kiire uriini sõeltest, mida saab teha ilma seadmeta. Testis kasutatakse monoklonaalseid antikehi, mis tuvastavad selektiivselt teatud uimastite kõrgenenud taset uriinis.

【ETTEVAATUSABINÕUD】

- Enne testi tegemist lugege kogu kasutusjuhend läbi.
- Enesetestimiseks, ei ole mõeldud *in vitro* diagnostikaks.
- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage testi pärast pakendile trükitud kõlblikkusaja lõppu.
- Ärge kasutage testi, kui fooliumpakend on rebenenud või kahjustatud.
- Ühekordseks kasutamiseks. Visake pärast kasutamist ära.
- Testpaneel peab kuni kasutamiseni jääma suletud pakendisse.
- Saastunud või võltsitud uriiniproov võib anda vale tulemuse.
- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

【KAASASOLEVAD MATERJALID】

- Testpaneel (suletud fooliumpakendis koos kuivatusainega)
- Kasutusjuhend

【VAJALIKUD, KUID MITTE KAASASOLEVAD MATERJALID】

• Käekell, kell või taimer • Uriini kogumisanum

【SÄILITAMINE JA STABIILSUS】

Säilitada originaalpakendis suletud fooliumkotis temperatuuril 2–30 °C kuni kõlblikkusaja lõpuni.

Hoida otsese päikesevalguse, niiskuse ja kuumuse eest. MITTE KÜLMUTADA.

【KASUTUSJUHISED】

Enne testimist laske testil saavutada toatemperatuur (15–30 °C).
Peske käed põhjalikult.

1. samm: uriiniproovi kogumine

- Koguge uriin puhtasse ja kuiva anumasse.


2. samm: testimine

- Võtke testpaneel suletud pakendist välja ja kasutage seda kohe.
- Eemaldage paneeli kork.
- Kastke testpaneel vertikaalselt uriiniproovi vähemalt **10–15 sekundiks**.
- **Märkus:** kastke paneel vähemalt lainjate joonteni, kuid mitte üle testpaneelil oleva noole.
- Pange kork tagasi ja asetage testpaneel mitteimavale tasasele pinnale.
- Käivitage taimer.


3. samm: tulemuste lugemine

- **Lugege tulemused 5 minuti möödudes**, ärge lugege tulemusi pärast 10 minuti möödumist.

• Eemaldage kork.
• Kastke 10–15 sekundit

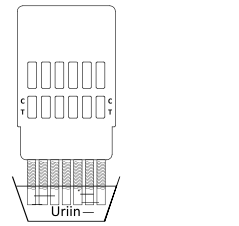

1

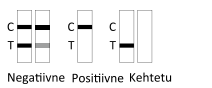

2

【TULEMUSTE TÕLGENDAMINE】

	**Negatiivne: ilmub kaks värvilist joont.** Üks joon ilmub tähe „C“ kõrvale ja teine tähe „T“ kõrvale.
	**Positiivne: ainult üks värviline joon ilmub tähe „C“ kõrvale. Tähe „T“ kõrvale värvilist joont ei ilmu.**
	**Kehtetu: kontrolljoon ei ilmu.**

OLULINE: saadud tulemust ei nimetata esialgseks asjata. Tulemuse kinnitamiseks tuleb proov laboris uurida.

【KÜSIMUSED JA VASTUSED】

1. Kuidas ma tean, kas test töötas korrektselt?
Kui ilmub kontrolljoon (C), tähendab see, et test töötab korrektselt.

2. Kui kiiresti saan tulemusi lugeda?
Tulemusi saate lugeda 5 minuti möödudes, kui kontrollala (C) kõrvale on ilmunud värviline joon; ärge lugege tulemusi pärast 10 minuti möödumist.

3. Millal on parim aeg testi tegemiseks?
Testi võib teha mis tahes kellaajal.

4. Kuidas testi lugeda, kui joonte värv ja intensiivsus on erinevad?
Joonte värvil ja intensiivsusel ei ole tulemuse tõlgendamisel tähtsust. Kui tähe „T“ kõrvale ilmub mis tahes intensiivsusega joon (isegi väga nõrk), on tulemus negatiivne.

5. Mis on valepositiivne tulemus?
Valepositiivne tulemus tähendab, et uimastit proovis ei ole, kuid test näitab selle olemasolu. Valepositiivse tulemuse kõige sagedasem põhjus on ristreageerivad ained.

6. Mis on valenegatiivne tulemus?
Valenegatiivne tulemus tähendab, et uimasti on proovis olemas, kuid test seda ei tuvasta. Valenegatiivse tulemuse võib põhjustada lahjendatud või saastunud proov.

【PIIRANGUD】

1. Test on ette nähtud kasutamiseks ainult inimese uriiniga.
2. Test annab ainult esialgse tulemuse.
3. Uriiniproovis olevad ained, näiteks valgendi ja/või maarjassool, võivad põhjustada valesid tulemusi. Kui kahtlustate proovi võltsimist, tuleb testi korrata teise uriiniprooviga.
4. Test ei erista kuritarvitatavaid uimasteid teatud ravimitest.
5. Positiivse testitulemuse võivad põhjustada teatud toiduained või toidulisandid.

Sümbolite register

	Tutvuge kasutusjuhendiga või elektroonilise kasutusjuhendiga		Sisaldab piisavalt <n> testi jaoks		Temperatuuripiirang
	Ettevaatust	LOT	Partii kood	REF	Kataloginumber
EU REP	Euroopa volitatud esindaja		Kõlblik kuni kuupäev		Ärge taaskasutage
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud, ja lugege kasutusjuhendit.		Tootja		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Number:
Versiooni kuupäev: 2026-09-23

11 huumausaineen pikatestipaneeli (Virtsa) Käyttöohje Itsetestaukseen

Pikatesti useiden huumausaineiden ja niiden metaboliittien kvalitatiiviseen osoittamiseen ihmisen virtsasta.
Itsetestaukseen, ei in vitro -diagnostiseen käyttöön.

【KÄYTTÖTARKOITUS】

11 huumausaineen pikatestipaneeli on nopea kromatografinen immunomääritys useiden huumausaineiden ja niiden metaboliittien kvalitatiiviseen osoittamiseen virtsasta seuraavilla raja-arvopitoisuuksilla:

Testi	Kalibraattori	Raja-arvo (ng/ml)
Amfetamiini (AMP)	d-amfetamiini	1 000
Barbituraatit (BAR)	Sekobarbitaali	300
Bentsodiatsepiinit (BZO)	Oksatsepaami	300
Kokaiini (COC)	Bentsoyyliekgoniini	300
Marihuana (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH	50
Metadoni (MTD)	Metadoni	300
Metamfetamiini (MET)	d-metamfetamiini	1 000
Metylendioksimetamfetamiini (MDMA)	d,l-metyleenidioksimetamfetamiini	500
Morfiini / opiaatit (MOP/OPI)	Morfiini	300
Fentanyyli (FYL)	Fentanyyli	10
Mefedroni (MEP)	Mefedroni	100

Testi antaa vain alustavia tuloksia. Varmistetun analyyttisen tuloksen saamiseksi on käytettävä spesifisempää vaihtoehtoista kemiallista menetelmää. Suositeltava varmistusmenetelmä on GC/MS tai LC/MS.

【YHTEENVETO】

11 huumausaineen pikatestipaneeli on nopea virtsan seulontatesti, joka voidaan tehdä ilman laitetta. Testissä käytetään monoklonaalisia vasta-aineita, jotka osoittavat selektiivisesti tiettyjen huumausaineiden kohonneet pitoisuudet virtsassa.

【VAROTOIMET】

- Lue koko käyttöohje ennen testin tekemistä.
- Itsetestaukseen, ei *in vitro* -diagnostiseen käyttöön.
- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä käytä testiä pakkaukseen painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä testiä, jos foliopussi on revennyt tai vaurioitunut.
- Kertakäyttöinen. Hävitä käytön jälkeen.
- Testipaneelin on oltava suljetussa pussissa käyttöön asti.
- Kontaminoitunut tai manipuloitu virtsanäyte voi antaa vääriä tuloksia.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.

【PAKKAUKSEN SISÄLTÖ】

- Testipaneeli (suljetussa foliopussissa kuivausaineen kanssa)
- Käyttöohje

【TARVITTAVAT VÄLINEET, JOITA EI TOIMITETA PAKKAUKSESSA】

• Kello tai ajastin • Virtsankeräysastia

【SÄILYTYS JA STABIILIUS】

Säilytä alkuperäispakkauksessa suljetussa pussissa 2–30 °C:ssa viimeiseen käyttöpäivään asti.

Suojaa suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja kuumuudelta. EI SAA JÄÄTYÄ.

【TESTIN SUORITTAMINEN】

Anna testin lämmetä huoneenlämpöiseksi (15–30 °C) ennen testausta.
Pese kädet huolellisesti.

Vaihe 1: Virtsanäytteen kerääminen

- Kerää virtsa puhtaaseen ja kuivaan astiaan.


Vaihe 2: Testaus

- Ota testipaneeli suljetusta pussista ja käytä se välittömästi.
- Poista paneelin korkki.
- Upota testipaneeli pystysuorassa virtsanäytteeseen vähintään **10–15 sekunnin** ajaksi.
- **Huomautus:** Upota paneeli vähintään aaltoviivojen tasolle, mutta ei testipaneelissa olevan nuolen yläpuolelle.
- Laita korkki takaisin paikalleen ja aseta testipaneeli imemättömälle, tasaiselle alustalle.
- Käynnistä ajastin.


Vaihe 3: Tulosten lukeminen

- **Lue testitulokset 5 minuutin kuluttua**, älä lue tuloksia 10 minuutin jälkeen.

• Poista korkki.
• Upota veteen 10–15 sekuntia

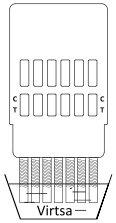

1

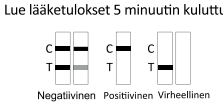

2

【TULOSTEN TULKINTA】

	**Negatiivinen: Näkyviin tulee kaksi värillistä viivaa.** Yksi viiva tulee näkyviin C-kirjaimen viereen ja toinen T-kirjaimen viereen.
	**Positiivinen: Vain yksi värillinen viiva tulee näkyviin C-kirjaimen viereen. T-kirjaimen viereen ei tule värillistä viivaa.**
	**Virheellinen: Kontrolliviiva ei tule näkyviin.**

TÄRKEÄÄ: Saamaasi tulosta ei turhaan kutsuta alustavaksi. Tuloksen varmistamiseksi näyte on tutkittava laboratoriossa.

【KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA】

1. Mistä tiedän, toimiko testi oikein?
Kun kontrolliviiva (C) tulee näkyviin, testi toimii oikein.

2. Kuinka pian voin lukea tulokset?
Voit lukea tulokset 5 minuutin kuluttua, kunhan kontrollialueen (C) viereen on tullut värillinen viiva. Älä lue tuloksia 10 minuutin jälkeen.

3. Milloin testi on paras tehdä?
Testin voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

4. Miten testi luetaan, jos viivojen väri ja voimakkuus vaihtelevat?
Viivojen värillä ja voimakkuudella ei ole merkitystä tuloksen tulkinnassa. Jos T-kirjaimen viereen tulee näkyviin minkä tahansa voimakkuinen viiva (heikkokin), tulos on negatiivinen.

5. Mikä on väärä positiivinen tulos?
Väärä positiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä ei ole huumausainetta, mutta testi näyttää sen olevan näytteessä. Väärän positiivisen tuloksen yleisin syy on ristireaktio muiden aineiden kanssa.

6. Mikä on väärä negatiivinen tulos?
Väärä negatiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä on huumausainetta, mutta testi ei osoita sitä. Laimennettu tai kontaminoitunut näyte voi aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen.

【RAJOITUKSET】

1. Testi on tarkoitettu vain ihmisen virtsan testaamiseen.
2. Testi antaa vain alustavan tuloksen.
3. Virtsanäytteessä olevat aineet, kuten valkaisuaine ja/tai aluna, voivat aiheuttaa vääriä tuloksia. Jos näytteen manipulointia epäillään, testi on toistettava toisella virtsanäytteellä.
4. Testi ei erota väärinkäytettyjä huumausaineita tietyistä lääkkeistä.
5. Tietyt ruoat tai ravintolisät voivat aiheuttaa positiivisen testituloksen.

Symbolihakemisto

	Katso käyttöohjeet tai tutustu sähköisiin käyttöohjeisiin		Sisältää riittävästi <n> testiin	30°C 2°C	Lämpötilaraja
	Varoitus	LOT	Eräkoodi	REF	Luettelonumero
EU REP	Valtuutettu edustaja Euroopassa		Parasta ennen -päiväys		Älä käytä uudelleen
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut, ja lue käyttöohjeet.		Valmistaja		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Numero:
Versiopäivä: 2026-09-23

Snabbtestpanel för 11 droger (Urin)
Bruksanvisning
För självtestning

Ett snabbtest för kvalitativ påvisning av flera droger och drogmetaboliter i human urin.
För självtestning, ej för in vitro-diagnostiskt bruk.

【AVSEDD ANVÄNDNING】

Snabbtestpanelen för 11 droger är en snabb kromatografisk immunanalys för kvalitativ påvisning av flera droger och drogmetaboliter i urin vid följande gränsvärden (cut-off):

Test	Kalibrator	Gränsvärde (ng/ml)
Amfetamin (AMP)	d-amfetamin	1 000
Barbiturater (BAR)	Sekobarbital	300
Bensodiazepiner (BZO)	Oxazepam	300
Kokain (COC)	Bensoylekgonin	300
Marijuana (THC)	11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH	50
Metadon (MTD)	Metadon	300
Metamfetamin (MET)	d-metamfetamin	1 000
Metylendioximetamfetamin (MDMA)	d,l-metylendioximetamfetamin	500
Morfin / opiater (MOP/OPI)	Morfin	300
Fentanyl (FYL)	Fentanyl	10
Mefedron (MEP)	Mefedron	100

Testet ger endast preliminära resultat. En mer specifik alternativ kemisk metod måste användas för att erhålla ett bekräftat analysresultat. GC/MS eller LC/MS är den föredragna bekräftelsemetoden.

【SAMMANFATTNING】

Snabbtestpanelen för 11 droger är ett snabbt screeningtest för urin som kan utföras utan instrument. Testet använder monoklonala antikroppar för att selektivt påvisa förhöjda halter av specifika droger i urin.

【FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER】

- Läs hela bruksanvisningen innan du utför testet.
- För självtestning, ej för *in vitro*-diagnostiskt bruk.
- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte testet efter det utgångsdatum som är tryckt på förpackningen.
- Använd inte testet om foliepåsen är trasig eller skadad.
- För engångsbruk. Kassera efter användning.
- Testenheten ska ligga kvar i den förseglade påsen tills den ska användas.
- Ett kontaminerat eller manipulerat urinprov kan ge felaktiga resultat.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

【MEDFÖLJANDE MATERIAL】

- Testpanel (förseglad i foliepåse med torkmedel)
- Bruksanvisning

【MATERIAL SOM BEHÖVS MEN INTE MEDFÖLJER】

- Klocka eller timer
- Uppsamlingsbägare för urin

【FÖRVARING OCH HÅLLBARHET】

Förvaras i originalförpackningen i den förseglade påsen vid 2–30 °C fram till utgångsdatum.

Skyddas mot direkt solljus, fukt och värme. FÅR EJ FRYSAS.

【ANVÄNDNINGSANVISNINGAR】

Låt testet anta rumstemperatur (15–30 °C) före testningen.
Tvätta händerna noggrant.

Steg 1: Samla in urinprov

- Samla urinen i en ren och torr behållare.


Steg 2: Testning

- Ta ut testpanelen ur den förseglade påsen och använd den omedelbart.
- Ta av panelens skyddshatt.
- Doppa testpanelen lodrätt i urinprovet i minst **10–15 sekunder**.
- **Obs!** Doppa panelen minst till nivån för de vågiga linjerna, men inte över pilen på testpanelen.
- Sätt tillbaka skyddshatten och placera testpanelen på en plan, icke-absorberande yta.
- Starta en timer.

Steg 3: Avläs resultaten


- **Avläs testresultaten efter 5 minuter**, avläs inte resultaten efter 10 minuter.

- Ta bort locket.
- Sänk ner i 10–15 sekunder

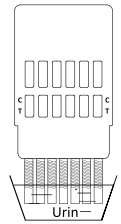

1

Läs av läkemedelsresultatet efter 5 minuter.

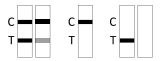

Negativt Positivt Ogiltigt

2

【TOLKNING AV RESULTAT】

	**Negativt: Två färgade linjer visas.** En linje visas bredvid bokstaven ”C” och den andra bredvid bokstaven ”T”.
	**Positivt: Endast en färgad linje visas bredvid bokstaven ”C”. Ingen färgad linje visas bredvid bokstaven ”T”.**
	**Ogiltigt: Kontrollinjen visas inte.**

VIKTIGT: Resultatet du har fått kallas preliminärt av en anledning. Provet måste analyseras av ett laboratorium för att resultatet ska kunna bekräftas.

【FRÅGOR OCH SVAR】

1. Hur vet jag om testet har fungerat som det ska?
När kontrollinjen (C) visas betyder det att testet fungerar som det ska.

2. Hur snart kan jag avläsa resultaten?
Du kan avläsa resultaten efter 5 minuter, förutsatt att en färgad linje har visats vid kontrollområdet (C). Avläs inte resultaten efter 10 minuter.

3. När är det bäst att göra testet?
Du kan göra testet när som helst under dygnet.

4. Hur avläser jag testet om linjernas färg och intensitet skiljer sig åt?
Linjernas färg och intensitet har ingen betydelse för tolkningen av resultatet. Om en linje av vilken intensitet som helst (även en mycket svag) syns vid ”T” ska resultatet betraktas som negativt.

5. Vad är ett falskt positivt resultat?
Ett falskt positivt resultat innebär att drogen inte finns i provet men att testet visar att den har påvisats. Den vanligaste orsaken till falskt positiva resultat är korsreagerande ämnen.

6. Vad är ett falskt negativt resultat?
Ett falskt negativt resultat innebär att drogen finns i provet men inte påvisas av testet. Ett utspätt eller kontaminerat prov kan orsaka ett falskt negativt resultat.

【BEGRÄNSNINGAR】

1. Testet är endast avsett att användas med human urin.
2. Testet ger endast ett preliminärt resultat.
3. Ämnen som blekmedel och/eller alun i urinprover kan ge felaktiga resultat. Om manipulation misstänks ska testet upprepas med ett annat urinprov.
4. Testet skiljer inte mellan missbruksdroger och vissa läkemedel.
5. Ett positivt testresultat kan orsakas av vissa livsmedel eller kosttillskott.

Symbolregister

	Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen		Innehåller tillräckligt för <n> tester	2°C 30°C	Temperaturgräns
	Försiktighet	LOT	Batchkod	REF	Katalognummer
EU REP	Europeisk auktoriserad representant		Bäst före-datum		Återanvänd inte
	Använd inte om förpackningen är skadad och läs bruksanvisningen.		Tillverkare		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EU REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Nummer:
Revisionsdatum: 2026-09-23